


人大细胞肺癌细胞 (NCI-H460 Cells)

细胞货号	T9902	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁生长	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:2-1:4，每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气，5% 二氧化碳，温度 37℃	
培养基	RPMI 1640 (abm Cat. No. TM503) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用：Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》，无特殊注意事项。	
STR 数据	- D5S818：9,10 - D13S317：13,13 - D7S820：9,12 - D16S539：9,9 - VWA：17,17 - TH01：9.3,9.3 - AMEL：X,Y - TPOX：8,8 - CSF1PO：11,12 - D12S391：21,21 - FGA：21,23 - D2S1338：17,25 - D21S11：30,30 - D18S51：13,15 - D8S1179：12,12	

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • D3S1358 : 15,18 • D6S1043 : 11,14 • PENTAE : 5,5 • D19S433 : 14,14 • PENTAD : 11,13 • D1S1656 : 11,14.3 |
|--|--|

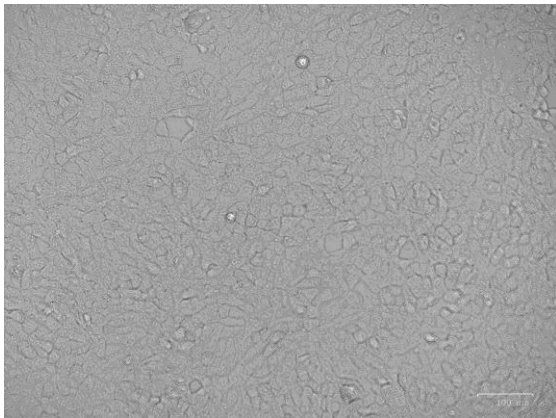

更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息

