


人咽鳞癌细胞 (FaDu Cells)

细胞货号	T9910	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁生长	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:3-1:4, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	MEM (abm Cat. No. TM511) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	1.该细胞复苏传代后贴壁较慢, 前几天应避免频繁观察及移动。	
STR 数据	• D5S818 12 12 • D13S317 8 9 • D7S820 11 12 • D16S539 11 11 • VWA 15 17 • TH01 8 8 • AMEL • TPOX 11 11 • CSF1PO 12 12 • D12S391 17 21 • FGA 25 25 • D2S1338 19 19 • D21S11 31.2 31.2 • D18S51 16 16 • D8S1179 13 13	

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• D3S1358 17 17• D6S1043 11 12• PENTAE 17 19• D19S433 14 16• PENTAD 11 11• D1S1656 16 16.3 |
|--|---|

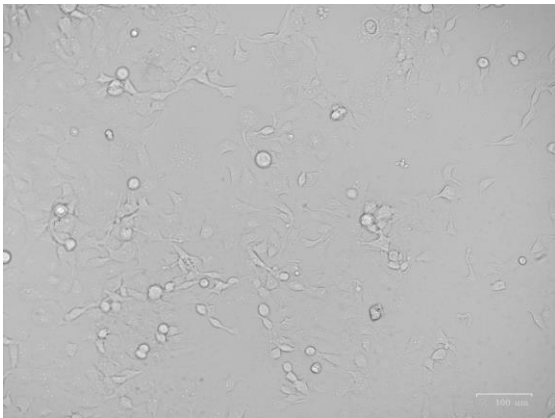

更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息

