


小鼠正常肝细胞 (NCTC 1469 Cells)

细胞货号	T9925	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	半贴半悬	
细胞形态	上皮细胞样，圆形	
倍增时间	24-48 h	
传代比例	1:2-1:4，每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气，5% 二氧化碳，温度 37℃	
培养基	High Glucose DMEM (abm Cat. No. TM500) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 0.1 Unit/ml Bovine insulin + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0℃, 5% CO ₂ . 推荐使用：Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	1.该细胞为半贴半悬，传代时注意收集飘起的细胞。 2.飘起的细胞可直接收集上清液，贴壁部分细胞需要用胰酶消化，消化时间不宜过长，以免过度消化影响细胞状态。	
STR 数据	1-1 : 10,- 1-2 : 16,- 2-1 : 9,- 3-2 : 14,15 4-2 : 20.3,- 5-5 : 15,- 6-4 : 18,- 6-7 : 12,- 7-1 : 26,27 8-1 : 14,16 11-2 : 16,18 12-1 : 16,-	

- 13-1 : 17.1,-
- 15-3 : 25.3,-
- 17-2 : 15,16,17
- 18-3 : 16,-
- 19-2 : 11,12
- X-1 : 26,-
- TH01 : -, -
- D5S818 : -, -

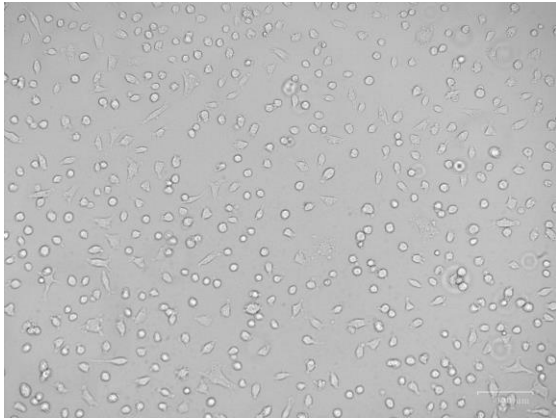