


人肺鳞癌细胞 (SK-MES-1 Cells)

细胞货号	T9928	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:2-1:3，每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气，5% 二氧化碳，温度 37℃	
培养基	MEM (abm Cat. No. TM511) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/ Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用：Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》，无特殊注意事项。	
STR 数据	• D5S818 : 11 • D13S317 : 11 • D7S820 : 8 • D16S539 : 13 • VWA : 14 • TH01 : 6,9.3 • AMEL : X,Y • TPOX : 8 • CSF1PO : 12 • D12S391 : 22 • FGA : 20,24 • D2S1338 : 19 • D21S11 : 29,30 • D18S51 : 17 • D8S1179 : 13,14	

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • D3S1358 : 16 • D6S1043 : 12,19 • PENTAE : 5,11 • D19S433 : 14 • PENTAD : 12,13 • D2S441 : 10,14 |
|--|--|

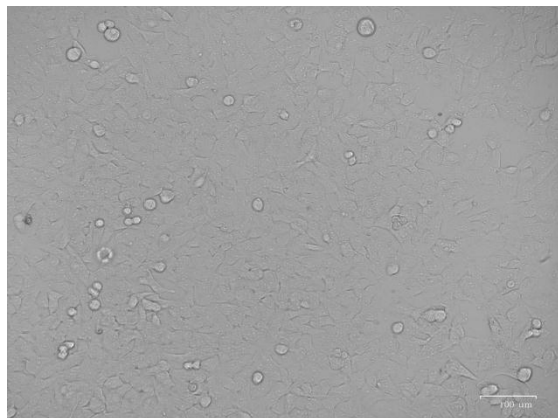

更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息

