


人肺鳞癌细胞 (NCI-H226 Cells)

细胞货号	T9929	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	24-48 h	
传代比例	1:3-1:4，每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气，5% 二氧化碳，温度 37℃	
培养基	RPMI 1640 (abm Cat. No. TM503) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1%Glutamax + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0℃, 5% CO ₂ . 推荐使用：Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》，无特殊注意事项。	
STR 数据	• D5S818 : 11,12 • D13S317 : 13,14 • D7S820 : 8,10 • D16S539 : 9,12 • VWA : 17,17 • TH01 : 8,9.3 • AMEL : X,Y • TPOX : 8,11 • CSF1PO : 10,11 • D12S391 : 22,22 • FGA : 20,23 • D2S1338 : 25,25 • D21S11 : 29,32.2 • D18S51 : 16,16 • D8S1179 : 14,15	

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • D3S1358 : 16,16 • D6S1043 : 13,18 • PENTAE : 12,15 • D19S433 : 15,15 • PENTAD : 9,10 • D2S441 : 14,14 |
|--|--|

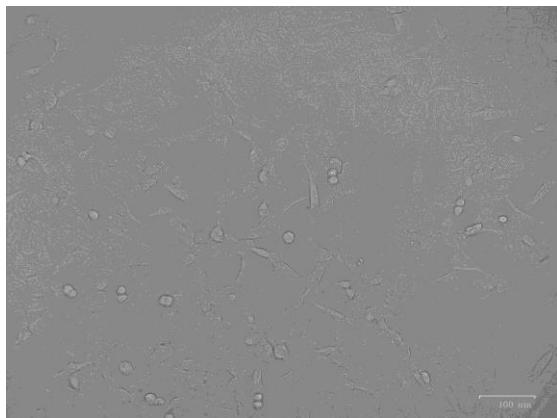

更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息

