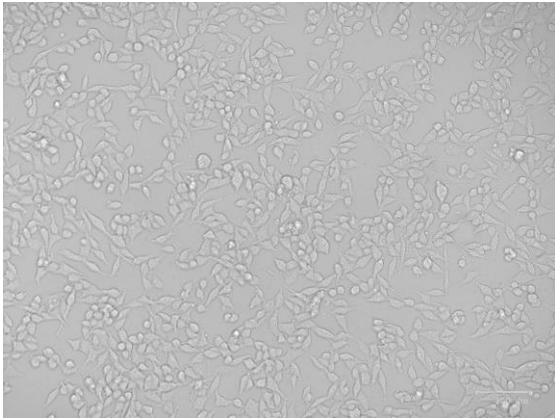


人结肠腺癌细胞 (RKO Cells)

细胞货号	T9930	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:2-1:4, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37℃	
培养基	MEM (abm Cat. No. TM511) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0℃, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》, 无特殊注意事项。	
STR 数据	• D5S818 : 11,13 • D13S317 : 8,11 • D7S820 : 8,10 • D16S539 : 12,13 • VWA : 16,22 • TH01 : 6,10 • AMEL : X,X • TPOX : 11,11 • CSF1PO : 8,10 • D12S391 : 15,20 • FGA : 20,21 • D2S1338 : 16,16	

电话: 400-833-1885

网址: www.abmGood.com

订购: order.china@china-abm.com

技术: technical.china@abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多信息



下载有问必答app
获取更多信息

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• D21S11 : 27,30• D18S51 : 11,12• D8S1179 : 9,13• D3S1358 : 16,19• D6S1043 : 14.1,19• PENTAE : 11,13• D19S433 : 14,14• PENTAD : 10,11• D2S441 : 11,11 |
|--|---|

电话：400-833-1885

网址：www.abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多信息



下载有问必答app
获取更多信息



订购：order.china@china-abm.com

技术：technical.china@abmGood.com