


人小细胞肺癌细胞 (NCI-H446 Cells)

细胞货号	T9931	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:3-1:4，每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气，5% 二氧化碳，温度 37°C	
培养基	RPMI 1640 (abm Cat. No. TM503) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Glutamax+1% Sodium Pyruvate + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用：Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》，无特殊注意事项。	
STR 数据	• D5S818 : 11,11 • D13S317 : 8,8 • D7S820 : 10,11 • D16S539 : 12,12 • VWA : 18,19 • TH01 : 8,9.3 • AMEL : X,Y • TPOX : 9,11 • CSF1PO : 13,14 • D12S391 : 17,18 • FGA : 22,22 • D2S1338 : 18,20 • D21S11 : 28,28	

- D18S51 : 12,13
- D8S1179 : 13,15
- D3S1358 : 17,17
- D6S1043 : 11,11
- PENTAE : 9,10
- D19S433 : 13,14
- PENTAD : 12,13
- D2S441 : 10,11

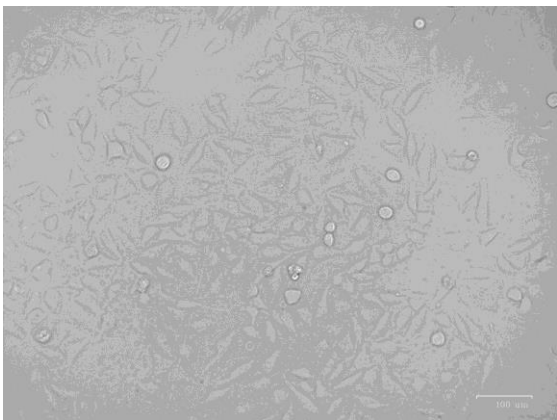