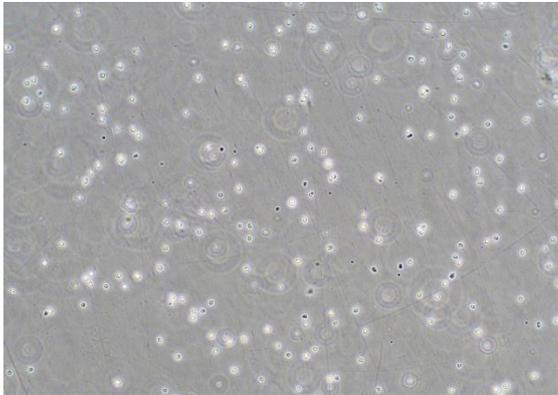


人 B 淋巴瘤细胞 (SU-DHL-4 Cells)

细胞货号	T9932	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	悬浮	
细胞形态	淋巴母细胞样	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:2-1:3, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	RPMI 1640 (abm Cat. No. TM503) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1%Glutamax + 1% Sodium Pyruvate + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》，无特殊注意事项。	
STR 数据	<ul style="list-style-type: none"> • D5S818 : 11,12 • D13S317 : 11,12 • D7S820 : 8,11 • D16S539 : 11,13 • VWA : 18,19 • TH01 : 6,9,3 • AMEL : X,Y • TPOX : 9,11 • CSF1PO : 12,12 • D12S391 : 18,20 • FGA : 19,21 	

电话: 400-833-1885

网址: www.abmGood.com

订购: order.china@china-abm.com

技术: technical.china@abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息



- D2S1338 : 17,19
- D21S11 : 29,30
- D18S51 : 14,16
- D8S1179 : 13,13
- D3S1358 : 15,16
- D6S1043 : 11,11
- PENTAE : 7,11
- D19S433 : 14,15.2
- PENTAD : 9,14
- D1S1656 : 15,18.3

 电话：400-833-1885

 网址：www.abmGood.com

 订购：order.china@china-abm.com

 技术：technical.china@abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息

