


人 B 淋巴细胞急性白血病 (BALL-1 Cells)

细胞货号	T9948	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	悬浮	
细胞形态	淋巴细胞样	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:2-1:4，每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气，5% 二氧化碳，温度 37℃	
培养基	RPMI 1640 (abm Cat. No. TM503) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用：Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》，无特殊注意事项。	
STR 数据	• D5S818 : 10,13 • D13S317 : 9,12 • D7S820 : 10,12 • D16S539 : 9 • VWA : 14,18 • TH01 : 7,9 • AMEL : X,Y • TPOX : 8,11 • CSF1PO : 10,12 • D12S391 : 19,20 • FGA : 22,23 • D2S1338 : 19,22 • D21S11 : 30 • D18S51 : 13 • D8S1179 : 10,14	

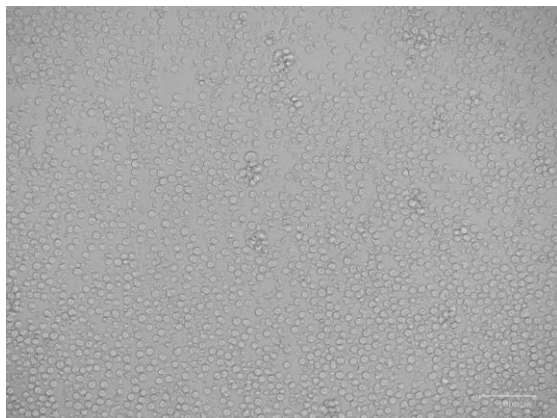

	• D3S1358 : 16 • D6S1043 : 12,18 • PENTAE : 14,16 • D19S433 : 13,15.2 • PENTAD : 9,10 • D1S1656 : - • D2S441 : 9.1,10
--	---