


人视网膜神经胶质瘤细胞 (WERI-Rb-1 Cells)

细胞货号	T9949	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	悬浮	
细胞形态	圆形聚团	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:2-1:4，每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气，5% 二氧化碳，温度 37℃	
培养基	RPMI 1640 (abm Cat. No. TM503) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0℃, 5% CO ₂ .	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》，无特殊注意事项。	
STR 数据	• D5S818 : 11,12 • D13S317 : 14 • D7S820 : 10,13 • D16S539 : 13 • VWA : 17,18 • TH01 : 9.3 • AMEL : X,X • TPOX : 8,11 • CSF1PO : 10,13 • D12S391 : 19,21 • FGA : 21 • D2S1338 : 20,25 • D21S11 : 29 • D18S51 : 13,19 • D8S1179 : 12,15 • D3S1358 : 14,15	



- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • D6S1043 : 12,19 • PENTAE : 7,11 • D19S433 : 14,15 • PENTAD : 12,13 • D1S1656 : - • D2S441 : 11,13 |
|--|--|

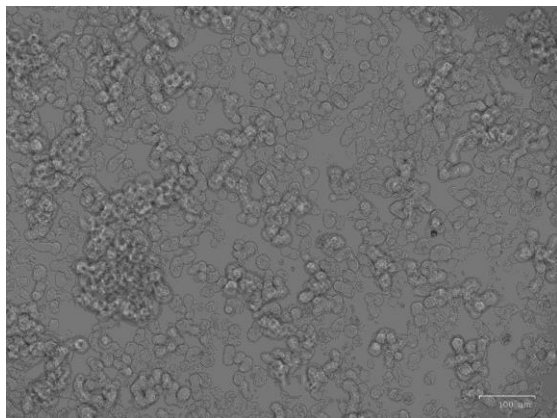

更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息

