


人肺腺癌细胞 (NCI-H1395 Cells)

细胞货号	T9952	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	24-48 h	
传代比例	1:2-1:4, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	RPMI 1640 (abm Cat. No. TM503) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》, 无特殊注意事项。	
STR 数据	- D5S818 : 12 - D13S317 : 10,14 - D7S820 : 8 - D16S539 : 11,13 - VWA : 14,17 - TH01 : 6,9,3 - AMEL : X - TPOX : 8 - CSF1PO : 12 - D12S391 : 20,22 - FGA : 18,23 - D2S1338 : 17,24 - D21S11 : 29 - D18S51 : 12,14 - D8S1179 : 12,14	

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• D3S1358 : 15• D6S1043 : 18,19• PENTAE : 7• D19S433 : 13,16• PENTAD : 12• D2S441 : 10,11 |
|--|--|

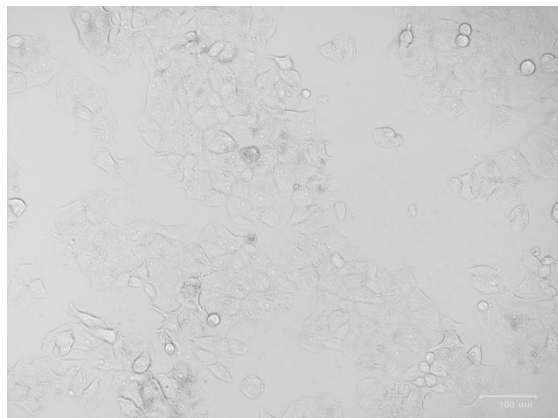

更多细胞详情扫一扫
获取更多信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息

