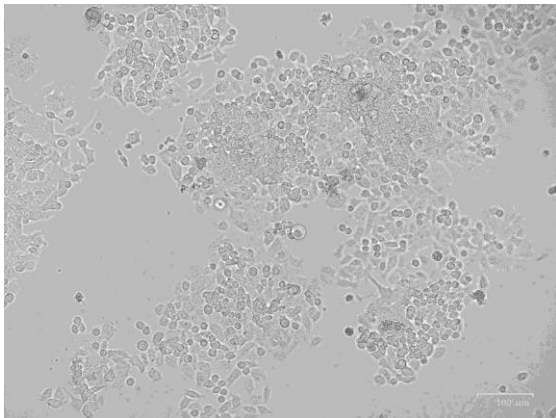


人肺鳞癌细胞 (NCI-H520 Cells)

细胞货号	T9955	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:2-1:4, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	RPMI 1640 (abm Cat. No. TM503) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	1.该细胞生长容易堆积。传代比例不宜过高。	
STR 数据	- D5S818 : 12,13 - D13S317 : 10,11 - D7S820 : 8,12 - D16S539 : 8,13 - VWA : 18,19 - TH01 : 10,10 - AMEL : X,X - TPOX : 8,8 - CSF1PO : 10,10 - D12S391 : 21,21 - FGA : 22,22 - D2S1338 : 18,23 - D21S11 : 30,30 - D18S51 : 17,17 - D8S1179 : 14,16,17	

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • D3S1358 : 16,16 • D6S1043 : 12,18 • PENTAE : 5,14 • D19S433 : 13,14 • PENTAD : 13,13 • D1S1656 : 14,16.3 |
|--|---|