


人肺腺癌细胞(胸水) (Calu-3 Cells)

细胞货号	T9957	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:2-1:4, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	MEM (abm Cat. No. TM511) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% NEAA + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》，无特殊注意事项。	
STR 数据	<ul style="list-style-type: none"> • D5S818 : 11 • D13S317 : 12 • D7S820 : 10,11 • D16S539 : 12,14 • VWA : 16,17 • TH01 : 6,9.3 • AMEL : X • TPOX : 8 • CSF1PO : 11,12 • D12S391 : 21,22 • FGA : 25 • D2S1338 : 19 • D21S11 : 28,30 • D18S51 : 14,17 • D8S1179 : 11,15 	

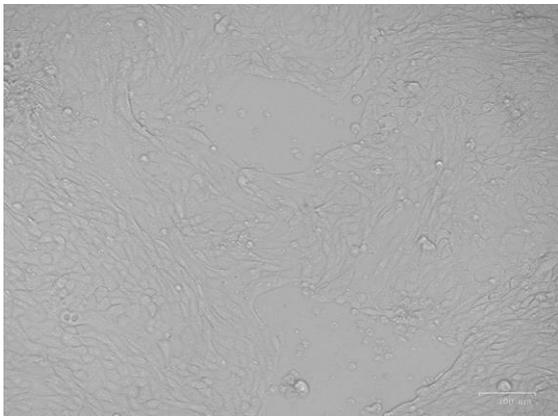

- D3S1358 : 15,18
- D6S1043 : 11
- PENTAE : 5,21
- D19S433 : 12,13
- PENTAD : 9,16
- D2S441 : 14

 电话: 400-833-1885

 网址: www.abmGood.com

 订购: order.china@china-abm.com

 技术: technical.china@abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息

