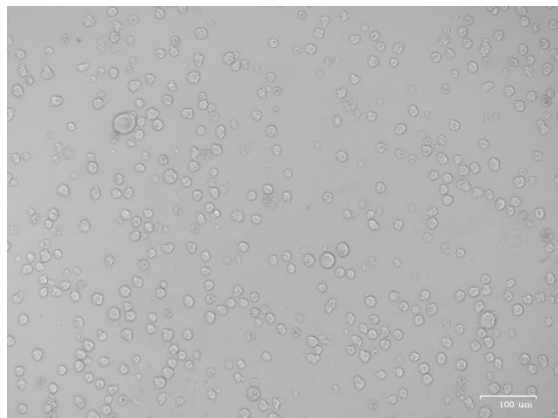


弥漫大 B 细胞淋巴瘤细胞 (DB Cells)

细胞货号	T9958	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	悬浮	
细胞形态	淋巴母细胞样	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:2-1:4, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	RPMI 1640 (abm Cat. No. TM503) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》, 无特殊注意事项。	
STR 数据	• D5S818 : 11 • D13S317 : 11,12 • D7S820 : 11 • D16S539 : 11 • VWA : 15,16 • TH01 : 6,8 • AMEL : X,Y • TPOX : 8 • CSF1PO : 10,11 • D12S391 : 17 • FGA : 22 • D2S1338 : 18,24 • D21S11 : 29,31.2 • D18S51 : 15 • D8S1179 : 13,14	

	• D3S1358 : 18 • D6S1043 : 12 • PENTAE : 10 • D19S433 : 11,13 • PENTAD : 9,12 • D1S1656 : - • D2S441 : 14
--	---