


小鼠胚胎成纤维细胞 (C3H/10T1/2, Clone 8 Cells)

细胞货号	T9961	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁	
细胞形态	成纤维细胞样	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:2-1:4, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	MEM (abm Cat. No. TM511) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% NEAA + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》, 无特殊注意事项。	
STR 数据	• 1-1 : 10 • 1-2 : 16 • 2-1 : 9 • 3-2 : 14, • 4-2 : 20.3 • 5-5 : 15, • 6-4 : 18, • 6-7 : 12 • 7-1 : 26, • 8-1 : 15 • 11-2 : 16 • 12-1 : 16 • 13-1 : 17.1 • 15-3 : 25.3, • 17-2 : 14	

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • 18-3 : 16, • 19-2 : 12, • X-1 : 26, • TH01 : - • D5S818 : - |
|--|---|

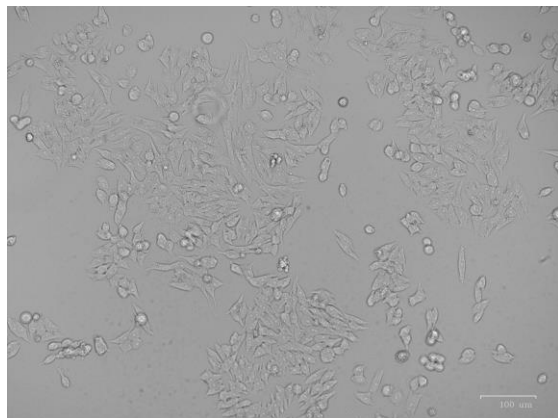

更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息

