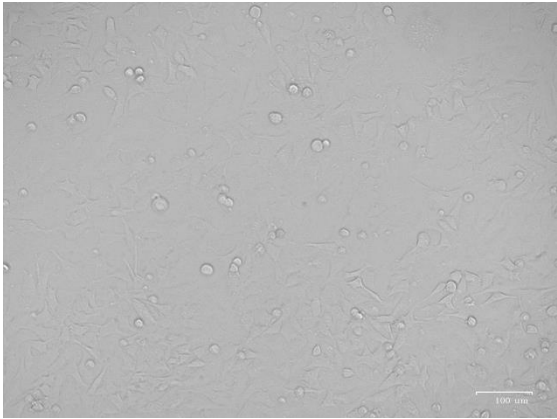


小鼠精母细胞 (GC-2spd(ts) Cells)

细胞货号	T9962	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:2-1:4, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	High Glucose DMEM (abm Cat. No. TM500) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》, 无特殊注意事项。	
STR 数据	• 1-1 : 17 • 1-2 : 13,19 • 2-1 : 16 • 3-2 : 14 • 4-2 : 20.3 • 5-5 : 14,17,18,19 • 6-4 : 18 • 6-7 : 17 • 7-1 : 26.2,29 • 8-1 : 16 • 11-2 : 16 • 12-1 : 17	

电话: 400-833-1885

网址: www.abmGood.com

订购: order.china@china-abm.com

技术: technical.china@abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多信息



下载有问必答app
获取更多信息



- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• 13-1 : 15.2,17.1• 15-3 : 22.3• 17-2 : 15• 18-3 : 16,17• 19-2 : 13• X-1 : 28• TH01 : -• D5S818 : - |
|--|--|

 电话: 400-833-1885

 网址: www.abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息



 订购: order.china@china-abm.com

 技术: technical.china@abmGood.com