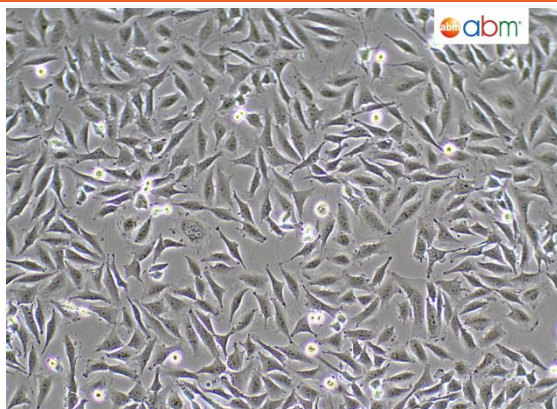


人胶质母细胞瘤细胞 (LN-229 Cells)

细胞货号	T9978	 T9978 – LN-229 Cells
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:2-1:3, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	High Glucose DMEM (abm Cat. No. TM500) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》, 无特殊注意事项。	
STR 数据	- D5S818 : 11,12 - D13S317 : 10,11 - D7S820 : 8,11 - D16S539 : 12,12 - VWA : 16,19 - TH01 : 9.3,9.3 - AMEL : X,X - TPOX : 8,8 - CSF1PO : 12,12 - D12S391 : 20,22 - FGA : 23,23 - D2S1338 : 19,20 - D21S11 : 29,30 - D18S51 : 13,15 - D8S1179 : 13,14	

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • D3S1358 : 16,17 • D6S1043 : 11,11 • PENTAE : 7,16 • D19S433 : 12,17.2 • PENTAD : 10,11 • D1S1656 : 14,17 |
|--|---|