


人结肠腺癌细胞 (LS 174T Cells)

细胞货号	T9989	 T9172 – HCC827 cells
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	72-96 h	
传代比例	1:2-1:3, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	MEM (abm Cat. No. TM511) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》, 无特殊注意事项。	
STR 数据	• D5S818 : 11,15 • D13S317 : 10 • D7S820 : 10.3,11 • D16S539 : 11,13 • VWA : 15,17 • TH01 : 6,7 • AMEL : X • TPOX : 8,9 • CSF1PO : 10,14 • D12S391 : 18,20 • FGA : 21,22 • D2S1338 : 18,22 • D21S11 : 29,31 • D18S51 : 11,13 • D8S1179 : 12,16	

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• D3S1358 : 15,17• D6S1043 : 12,13• PENTAE : 15,16• D19S433 : 14,15• PENTAD : 10• D2S441 : 10,11 |
|--|---|

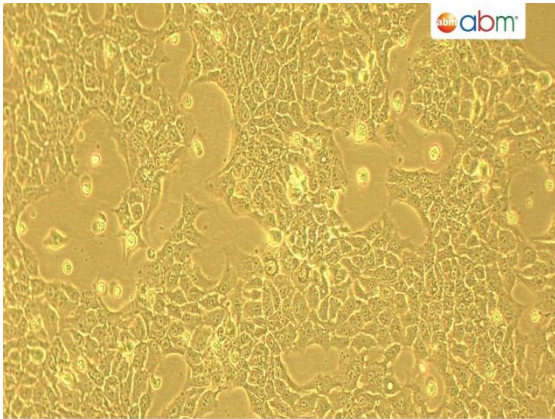

更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下载有问必答app
获取更多优惠信息

