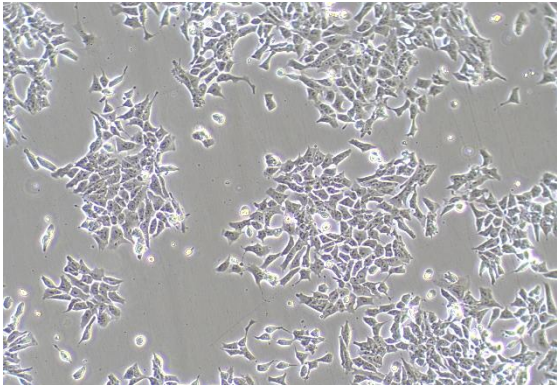


小鼠畸胎瘤细胞 (P19 Cells)

细胞货号	T9993	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:2-1:3, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	MEM-a + 7.5%NCS + 2.5%FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》, 无特殊注意事项。	
STR 数据	• 1-1 : 10 • 1-2 : 17 • 2-1 : 9 • 3-2 : 14 • 4-2 : 13,21.3 • 5-5 : 14 • 6-4 : 18 • 6-7 : 12 • 7-1 : 26 • 8-1 : 16 • 11-2 : 16 • 12-1 : 16 • 13-1 : 17.1 • 15-3 : 26.3 • 17-2 : 15	

	• 18-3 : 16,17 • 19-2 : 12,14 • X-1 : 26 • TH01 : - • D5S818 : -
--	--